

- Precautions:**
1. Tips are disposable; do not reuse.
 2. Do NOT allow volumes of material to be ingested. Collect extraneous material with proper vacuuming techniques.
 3. DO NOT use on patients with known sensitivity to chlorhexidine.
 4. Use Ultradent® Syringe Covers sealed with the Ultradent® Impulse Sealer for a protective barrier to prevent cross-contamination.

Treatment Notes:
For composite and amalgam preparations, etc., treat surfaces the same as for temporary crown cementation. Place appropriate dentin liner and/or base as needed (we recommend Ultra-Blend® plus™).

3. Cement crown, inlay, etc., onto rinsed preparation following removal of excess water. Take seconds to bring the disinfectant closer to body temperature.

Note: If patient is not anesthetized, hold the syringe of Consepsis Scrub under hot tap water for 10

seconds to bring the disinfectant closer to body temperature. Take seconds to bring the disinfectant closer to body temperature. Note: If patient is not anesthetized, hold the syringe of Consepsis Scrub under hot tap water for 10 seconds to bring the disinfectant closer to body temperature.



Fig 5 Disinfect and clean in one directly from syringe onto tooth with a White Mac tip or into rubber cup with a cement etc., before permanent or without tip.

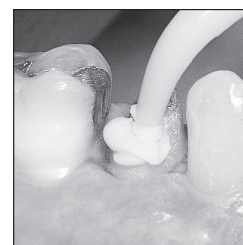



Fig 4 Express Consepsis Scrub directly from syringe onto tooth with a White Mac tip or into rubber cup with a cement etc., before permanent or without tip.

2. Deliver Consepsis Scrub directly through a White Mac tip or to prophyl cup from syringe directly to the preparation. Note Figs. 4 and 5.

Procedure:

1. Before definitive cementation, thoroughly clean preparation with Consepsis Scrub. We recommend using Ultradent Starbrushes with Consepsis Scrub for cleaning deep grooves on tooth surfaces.

Ultradent syringes have an expiration date stamped on the side of the syringe consisting of one letter and three numbers. The letter is a lot number used for manufacturing purposes and the three numbers are the expiration date. The first two numbers are the month, and the third number is the last number of the year.

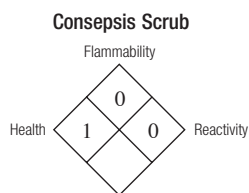

For product MSDS please visit our website:
www.ultradent.com

HAZARD RATING

- 4 = Severe
- 3 = Serious
- 2 = Moderate
- 1 = Slight
- 0 = Minimal

U.S. federal law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.
Keep out of reach of children.

For immediate reorder and/or complete descriptions of Ultradent's product line, refer to Ultradent's catalog or call Toll Free **1-800-552-5512**.
Outside U.S. call (801) 572-4200.
or visit www.ultradent.com

© Copyright 2011 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.

Manufactured by:
Ultradent Products Inc.
505 West 10200 South
South Jordan, Utah 84095 USA Made in USA

23989.5 030911

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

**Consepsis®
Scrub**
Chlorhexidine
Antibacterial
Slurry

Description:

Consepsis® Scrub is a lightly flavored 2.0% (relative to liquid component) chlorhexidine gluconate disinfecting scrub.

Indications:

Consepsis Scrub is used for removal of residual temporary cement prior to permanent cementation and/or for cleaning debris while disinfecting.

Pre-Treatment Procedure:

A. Using 1.2ml prefilled syringes:

1. Remove luer lock cap from syringe.
2. Twist disposable tip firmly onto syringe:


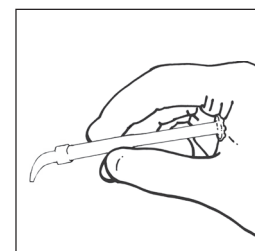


Fig. 1 Hold plunger in palm of hand for optimum control.

3. For optimum control, hold syringe in palm of hand rather than in conventional manner with thumb on plunger (see Fig. 1).

B. Using 30ml IndiSpense® System:


1. A pre-labeled unit dose syringe is attached to the end of the large, no-waste, IndiSpense syringe by turning the luer lock of the unit dose syringe snugly onto the male thread of the IndiSpense (see Fig. 2).
2. With the palm grasp (Fig. 3) the plunger of the IndiSpense syringe is depressed while the unit dose syringe is stabilized at the plunger with the nondominant hand. To prevent cross-contamination, a used syringe should not be reattached to the IndiSpense syringe. Do not express contents of unit dose syringe back into IndiSpense.
3. If not using the preloaded syringe immediately, replace luer lock cap until ready for use.

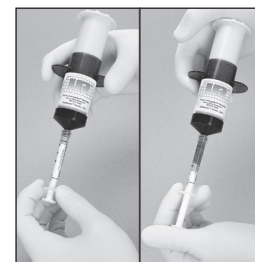


Figs. 2 & 3 A 1.2ml unit dose syringe is twisted firmly onto the IndiSpense syringe. Slightly depress plunger of IndiSpense and fill unit dose syringe to desired level.

Consepsis® Scrub Chlorhexidine Antibacterial Slurry

DE-Antibakterielles Chlorhexidin-Poliermittel/F-Pâte anti-bactérienne à base de chlorhexidine/ NL-antibacteriële chlorhexidinepasta/IT-Pasta antibatterica a base di Clorexidina/ ES-Pasta Acuosa Antibacteriana de Clorexidina/PT-Pasta Antibacteriana de Clorhexidina/ SV-Klorhexidin antibakteriell pasta/DA-Antobakteriel Chlorhexidin pasta/ FI-Antibakteerinen kloorheksidiini-tahna/EL-Αντιβακτηριακό Scrub Χλωρεξιδίνης

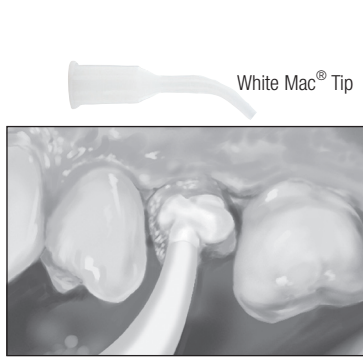

White Mac® Tip

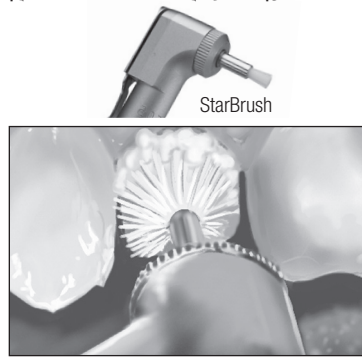

StarBrush

English Deliver Consepsis Scrub directly to tooth surface.

Scour with StarBrush at slow speed to remove residual temporary cement.

German Consepsis Scrub direkt auf die Zahnoberfläche aufbringen.

Mit StarBrush bei niedriger Umdrehungszahl einbürsten, um Reste von prov. Zementen zu entfernen.

French Appliquer le Consepsis Scrub directement sur la surface dentaire.

Frotter à l'aide de la StarBrush à faible vitesse afin d'enlever les résidus du ciment temporaire.

Dutch Breng Consepsis Scrub direct op het tandoppervlak aan.

Borstel op lage toeren met een StarBrush om restant aan tijdelijk cement te verwijderen.

Italian Applicare Consepsis Scrub direttamente sulla superficie dentaria.

Per la rimozione del cemento provvisorio sfregare con StarBrush a bassa velocità.

Spanish Aplique Consepsis Scrub directamente en la superficie del diente.

Fronte con fuerza con el StarBrush, a velocidad baja, para remover los residuos del cemento temporal.

Portuguese Aplicar Consepsis Scrub directamente na superfície dentária.

Utilizar StarBrush a baixa rotação para remover resíduos de cimento provisório.

Swedish Applicera Consepsis Scrub direkt på tandytan.

Skrubba med StarBrush med lågt varvtal för att avlägsna rester av temporärt cement.

Danish Appliçer Consepsis Scrub direkte på tandoverfladen.

Puds med StarBrush (eller tilsvarende pudsebørste) ved lav hastighed for at fjerne resterende provisorisk cement.

Finnish Applikoi Consepsis-tahna suoraan hampaan pinnalle.

Pese StarBrush hitailla kierroksilla poistaaksesi väliaikaisen sementin jäänteet.

Greek Τοποθετείστε Consepsis Scrub κατευθείαν στην επιφάνεια του δοντιού.

Καθαρίστε με StarBrush με χαμηλή ταχύτητα για να απομακρύνετε τα υπολείμματα της προσωρινής κονίας.

English General Precautions:

- For Professional use only.
- Review instructions, precautions, and MSDS before beginning treatment. Use only as directed.
- Keep products out of heat/sunlight.
- Avoid skin exposure to resins.
- Isolate strong chemicals to area of treatment.
- Confirm that patient has no known allergies to treatment materials.
- Test flow of materials from syringe and tip before using intraorally.
- Never force syringe plungers.
- Use Ultradent® Syringe Covers and/or clean and disinfect syringes between patient.
- Use standard curing lights with all light polymerized/activated materials.

Italian Precauzioni Generali:

- Prodotto riservato all'uso professionale.
- Prima di iniziare il trattamento vanno esaminate le istruzioni, le precauzioni d'uso ed i moduli per la sicurezza dei prodotti (MSDS). Utilizzare esclusivamente nei modi indicati.
- Conservare i prodotti al riparo dal calore e dall'esposizione diretta alla luce del sole.
- Evitare l'esposizione della pelle alle resine.
- La presenza di prodotti chimici forti deve essere isolata all'area di trattamento.
- Verificare che il paziente non sia allergico ai prodotti scelti per il trattamento.
- Prima dell'uso intraorale deve essere verificato il flusso del materiale dalla siringa e dalla punta.
- Non forzare mai gli stantuffi delle siringhe.
- Usare le guaine Ultradent® Syringe Covers e/o pulire e disinfettare le siringhe dopo ciascun paziente.
- Utilizzare lampade polimerizzatrici convenzionali per tutti i materiali fotopolimerizzabili e fotoattivabili.

German Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen:

- Nur für professionellen zahnmedizinischen Gebrauch.
- Lesen Sie die Gebrauchsinformationen und Warnhinweise sorgfältig, bevor Sie die Behandlung beginnen. Verwenden Sie die Materialien nur gemäß Vorschrift.
- Schützen Sie die Produkte vor Hitze und direktem Sonnenlicht.
- Vermeiden Sie Hautkontakt mit Kunststoff-Materialien.
- Beschränken Sie den Einfluß stark wirkender Agenzien auf das Behandlungsgebiet.
- Fragen Sie den Patient nach bekannten Allergien auf die zur Behandlung verwendeten Materialien.
- Prüfen Sie den Fluss des Materials aus der Spritze und durch den Spritzenansatz, bevor Sie intraoral applizieren.
- Drücken Sie einen Spritzenstempel nie mit Gewalt ein.
- Verwenden Sie Ultradent®-Spritzenhüllen und/oder reinigen und desinfizieren Sie die Spritzen nach jedem Patienten.
- Verwenden Sie für Materialien, die durch Licht zu polymerisieren bzw. zu aktivieren sind, die üblichen Polymerisationslampen.

Spanish Precauciones Generales:

- Para uso exclusivo de Profesionales.
- Antes de empezar el tratamiento, revise las instrucciones, precauciones y el MSDS. Siga las instrucciones.
- Siempre mantenga los productos alejados del calor y de la luz solar.
- Evite el contacto de los resinas con la piel.
- Aisle los químicos fuertes del área de tratamiento.
- Asegúrese que el paciente no es alérgico a los materiales.
- Antes de usar en la boca, verifique que los materiales fluyan de la jeringa y la punta.
- Nunca empuje con fuerza el émbolo.
- Use las cubiertas para jeringas de Ultradent® y/o limpie y desinfecte las jeringas entre pacientes.
- Utilice luces de fotocurado corrientes con todos los materiales activados/polimerizados con luz.

Portuguese Precauções gerais:

- Somente para uso profissional.
- Leir instruções, precauções e MSDS antes de começar o tratamento. Utilizar só como indicado.
- Manten os produtos longe do calor e da luz solar directa.
- Evitar contacto com a pele.
- Aplicar substâncias químicas fortes só na área de tratamento.
- Confirmar se os pacientes não tem alergias aos materiais utilizados.
- Testar o escoamento dos materiais através da seringa e ponta antes da aplicação intraoral.
- Nunca forçar os êmbolos da seringa.
- Utilizar protectores de seringa Ultradent® e/ou desinfetar seringas entre cada tratamento.
- Utilizar luzes de polimerização standard com todos os materiais fotopolimerizáveis.

Swedish Generella försiktighetsåtgärder:

- Enbart för professionellt bruk.
- Läs bruksanvisningar, försiktighetsåtgärder, och varuinformationsblad innan behandling påbörjas. Använd endast enligt anvisning.
- Håll produkten borta från värme och solljus.
- Undvik hudkontakt med resiner.
- Håll behandlingsområdet isolerat från starka kemikalier.
- Kontrollera att patienten inte är allergisk mot behandlingsmaterialet.
- Testa att materialet flyter fritt ur sprutans spets innan användning intraoralt.
- Tvinga ej med "vård" hårt tryck pistongen i sprutan.
- Använd Ultradent® sprutskydd och/eller rengör sprutor mellan patienter.
- Använd vanligt ljushårdningslampa till alla ljusaktiverade polymeriseringsmaterial.

French Précautions générales:

- Exclusivement réservé à l'usage professionnel.
- Voir les instructions, les précautions et la notice de sécurité avant le traitement. Utiliser uniquement selon les instructions.
- Tenir les produits à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur.
- Eviter le contact des résines avec la peau.
- Limiter l'application des produits aux seules zones de traitement.
- S'assurer que le patient ne présente aucune allergie aux produits utilisés lors du traitement.
- Tester le débit des matériaux à travers les seringues et les embouts d'application avant toute utilisation intra-buccale.
- Ne jamais forcer sur le piston des seringues.
- Utiliser les couvre-seringues Ultradent® et/ou nettoyer et désinfecter les seringues après utilisation.
- Utiliser une lampe à photopolymériser standard avec les matériaux photopolymérisables ou photoactivables.

Dutch Algemene voorzorgsmaatregelen:

- Uitsluitend bestemd voor aflevering aan een toepassing door tandartsen.
- Raadpleeg gebruiksaanwijzingen en houd rekening met de daarin genoemde aanbevelingen. Gebruik alleen zoals is beschreven.
- Bewaar de producten koel en donker.
- Vermijd huidcontact met harsen.
- Appliqueer alleen daar waar nodig.
- Overtuig u ervan dat de patiënt niet allergisch is voor de toegepaste materialen.
- Test het functioneren van spuitjes alvorens intra-oraal te gebruiken.
- Oefen nooit overmatige kracht uit bij de spuitjes.
- Gebruik Ultradent® Syringe Covers en/of schone spuitjes bij elke patiënt.
- Gebruik steeds geteste lichtuithardingsapparaten.

Danish Generelle forholdsregler:

- Kun til professionelt brug.
- Læs vejledningen, forholdsreglerne og sikkerhedsdatabladet før behandlingen starts. Bør kun anvendes som foreskrevet.
- Udsæt ikke produktet for varme og sollys.
- Undgå hudkontakt med resiner.
- Isoler stærke kemikalier til behandlingsområdet.
- Få bekræftet at patienten ikke har kendte allergier mod de produkter, der anvendes ved behandlingen.
- Check at materialet flyder frit fra sprøjte og spids for brug intraoralt.
- Undlad at bruge voldsom kraft til at tvinge et stempel i funktion. Hvis stemplet ikke glider uhindret bør årsagen udredes først.
- Brug Ultradent® Sprøjteposer og/eller rengør og desinficér sprøjterne efter hver patient.
- Brug almindelig polymeriseringslampe til alle ljustværdende materialer.

Finnish Yleiset ohjeet:

- Vain ammattikäyttöön.
- Tutustu käyttöohjeisiin, suojustoimenpiteisiin ja käyttöturvallisuustiedotteeseen ennen toimenpiteiden aloittamista. Käytä ainoastaan ohjeiden mukaisesti.
- Säilytä tuote lämmöltä ja auringonvalolta suojattuna.
- Vältä ihokosketusta resinin kanssa.
- Eristä käsiteltävä alue vahvoista kemikaaleista.
- Varmista, että potilaalla ei ole todettuja allergioita hoitotoimenpiteessä käytettävälle aineille.
- Testaa materiaalin juoksevuus ruiskusta ja kärjestä ennen materiaalin käyttöä intraoraalisesti.
- Älä käytä liikaa voimaa painaessasi ruiskun mäntää.
- Käytä Ultradent® ruiskusuojaa ja/tai puhdistaa ruisku potilaiden välillä.
- Käytä standardisoitua valokovettajaa kaikkien valokovetteisten materiaalien kanssa.

Greek ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Για επαγγελματική χρήση μόνο.
- Διαβάστε τις οδηγίες, προφυλάξεις και MSDS πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία. Να το χρησιμοποιείτε πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Φυλάξτε τα προϊόντα από την έκθεσή τους στο ηλιακό φως ή σε θερμότητα.
- Αποφύγετε την επαφή της ρητίνης με το δέρμα.
- Περιορίστε την επαφή των ισχυρών χημικών μόνο στην περιοχή της θεραπείας.
- Να επιβεβαιώσετε ότι ο ασθενής δεν έχει καμιά γνωστή αλλεργική αντίδραση στα υλικά της θεραπείας.
- Να δοκιμάσετε τη ροή των υλικών από τη σύριγγα και το ρύγχος πριν τα χρησιμοποιήσετε ενδοστοματικά.
- Μην πιέζετε ποτέ με δύναμη το έμβολο της σύριγγας.
- Να χρησιμοποιείτε τα προστατευτικά καλύμματα σύριγγών της Ultradent® και να καθαρίζετε και να απολυμαίνετε τις σύριγγες μεταξύ των ασθενών.
- Να χρησιμοποιείτε μια κοινή συσκευή φωτοπολυμερισμού για όλα τα φωτοπολυμεριζόμενα / φωτοενεργοποιούμενα υλικά.

Key:

Legende:
Explication:
Erklärung der
Packungssymbole:
Legenda:
Clave:
Legenda:
Τοκενφοκλάρινγ:
Тогнфоклάρинг:
Merkinen selitykset:
Κλειδί:

REF

Catalog Number
Bestell-Nr.
Référence du catalogue
Catalogusnummer
Número de catálogo (codice d'ordine)
Número de catálogo
Κατάλογο αριθμός
Κατάλογος
Luettelonumero
Αριθμός καταλόγου

Destroy after use.
Nach Gebrauch vernichten.
Détruire après utilisation.
Na gebruik vernietigen.
Distruiggere dopo l'uso.
Destruygalo despues de usarlo.
Destruir após usar.
Förstöras efter användning.
Destruir efter brug.
Hävitta käyttön jälkeen.
Καταστρέψτε το μετά τη χρήση.

Not for injection.
Nicht zur Injektion.
Ne pas injecter.
Niet injecteren.
Non per iniezione.
Nao debe injectarse.
Nao injectar.
Ej för injektion.
Ikke til injektion.
Ei injektokäyttöön.
Μη ενέσιμο.



Keep out of reach of children.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Tenir hors de portée des enfants.
Buiten bereik van kinderen houden.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manten fora do alcance das crianças.
Förvaras utom räckhåll för barn.
Opbevar uitsigugængelig for barn.
Pidättävä poissa lasten ulottuvilta.
Φυλάξτε μακριά τα παιδιά.

Destint Dispensed.
Von Zahnarzt abzugeben.
Distribué par le Chirurgien-Dentiste.
Door de tandarts verstrekt.
Prescritto dal dentista.
Administrado por el Dentista.
Administrado pelo dentista.
Aplicadas em farmácia.
Administreret af tandlæge.
Hammassläkäärin käyttöön.
Διανέμεται από τον οδοντίατρο.

20°C
68°F

Store at room temperature

