



BisCem
Composite de scellement auto-adhésif

Accélérez vos scellements

BisCem
bis

BisCem



BisCem est un ciment résine auto-adhésif et automordançant pour le scellement adhésif sur la majorité des substrats (métaux, composites, céramique, amalgame).

BisCem ne nécessite pas de mordançage, d'apprêtage ou de mise en place d'adhésif sur les surfaces préparées et est disponible en 2 teintes, TRANSLUCIDE pour les restaurations esthétiques et OPAQUE en cas de nécessité de masquage.

BisCem est un système simplifié qui permet également de gagner du temps dans de nombreux cas.







- Ciment auto-adhésif et dual-cure formulé pour une élimination facile des excès
- Matériau radio-opaque (2.0 mm Al)
- Faible épaisseur du film pour une insertion complète de la restauration
- Avantages des verres ionomères avec la résistance des ciments résineux
- Mise en œuvre simple et rapide

Propriétés physiques (source : fabricant)

% charge (poids/volume) :	
Base :	60/36
Catalyseur :	62/40
Taille moyenne des particules :	
Base :	1.0 µm
Catalyseur :	3,5 µm
Épaisseur du film :	22 µm
Résistance à la tension diamétrale :	34 MPa
Résistance à la compression :	212 MPa
Résistance à la flexion :	42 MPa

Avantages cliniques

- Sans mordançage, ni rinçage, ni adhésif, pour un gain de temps et une réduction des étapes cliniques
- Identification facilitée sur les clichés radiographiques
- Conditionnement en double-seringue automélangeuse, éliminant le malaxage manuel et permettant la mise en place directe du ciment dans la restauration.

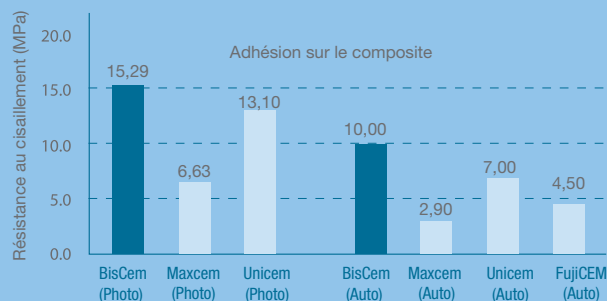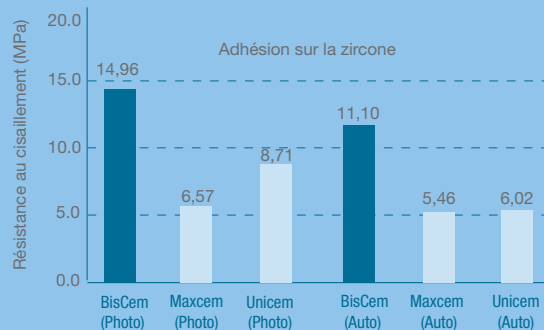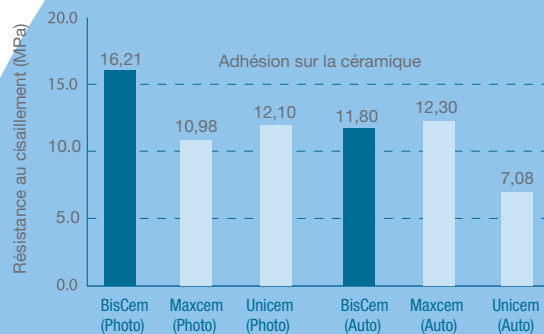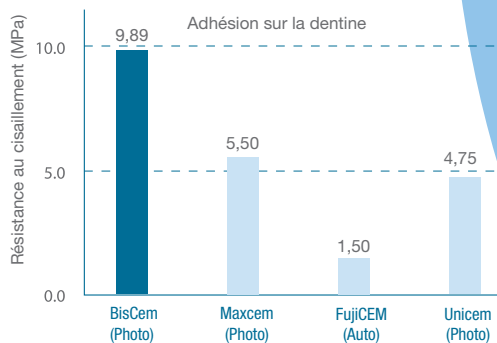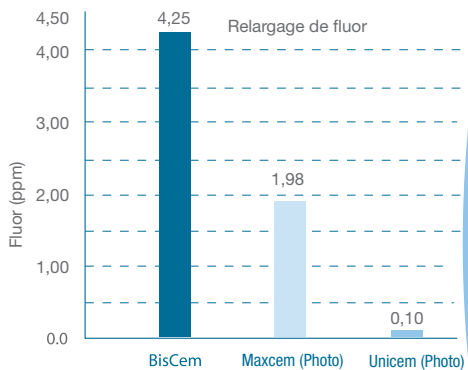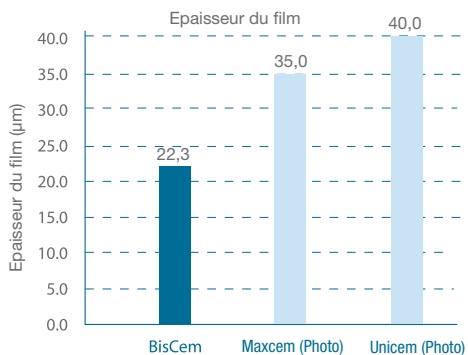

Les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs (Maxcem : Kerr - Unicem : 3M - FujiCEM : GC).

- **Ciment auto-adhésif (self-etch)**
- **Très bonne adhésion aux structures dentaires et substrats prothétiques**
- **Dual-cure**
- **Faible épaisseur du film**
- **Radio-opaque**
- **Malaxage automatique**
- **Élimination facile des excès**
- **Teintes opaque et translucide**

BC 794 - Kit BisCem Translucide

Contenu : 1 double-seringue BisCem Translucide (8 g)

- 15 embouts mélangeurs
- 15 embouts d'injection intracavitaire
- 15 embouts d'injection intraradiculaire



BC 795 - Kit BisCem Opaque

Contenu : 1 double-seringue BisCem Opaque (8 g)

- 15 embouts mélangeurs
- 15 embouts d'injection intracavitaire
- 15 embouts d'injection intraradiculaire

POUR COMMANDER :
0800 247 420 (appel gratuit)
ou www.bisico.fr

Fabriqué par :



Distribué par :



120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
www.bisico.fr

Ce Dispositif Médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE 0459 LNE/G-MED - Classe IIa. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne le Dispositif Médical ou sur l'étiquetage remis. Non-remboursé par les organismes d'assurance santé. Documentation BisCem (ZZ 317) - V2 - Novembre 2015.

Technique pour le scellement d'une coiffe (Images cliniques fournies par Le Fabricant)



Déposer la restauration provisoire et éliminer le ciment résiduel.



Remplir la restauration avec BisCem.



Insérer la restauration.



Photopolymériser 3 à 5 secondes, afin de faciliter l'élimination des excès de ciment.



Éliminer les excès de ciment.



Photopolymériser 20 à 30 secondes.