

# Sendoline®

PERFECT ENDO



# S5

ROTARY SYSTEM®



# S5 ROTARY SYSTEM<sup>®</sup>

## S5 Endo Motor<sup>®</sup>

SÛR, SIMPLE ET EFFICACE !


Système innovant de Sendoline pour le nettoyage mécanisé. L'endodontie simplement parfaite !

### Caractéristiques :

- Facile à utiliser**  
S5 Endo Motor + S5 Rotary Files = S5 Rotary System  
Utilise seulement 5 réglages avec 5 limes (S5 Rotary Files)  
Polyvalence totale, fonctionne avec la plupart des systèmes endodontiques  
Sans fil
- Sécurité**  
2 options : auto-reverse / auto-stop  
Indicateur de torque : un témoin lumineux signale lorsque le torque est atteint à 75 % de sa valeur  
Faible vitesse : 300 tours/min
- Temps de traitement réduit**  
Traitement réalisé de manière sûre et plus efficace grâce au S5 Rotary System et ses limes avec le design unique S-File.
- Accessibilité**  
Tête du contre-angle d'un diamètre de seulement 11 mm  
Mandrin raccourci (13 mm) sur les limes rotatives
- Non-stop**  
2h30 de fonctionnement continu
- Ergonomie**  
Poids : 120 g

**Sûr et sécurisé**  
Un témoin lumineux signale lorsque le torque est atteint à 75 % de sa valeur

### 5 réglages = 5 limes

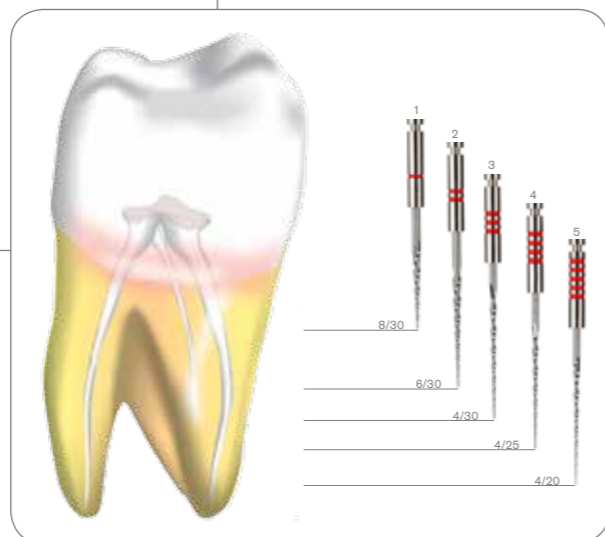

## S5 Rotary Files<sup>®</sup>



1, 2, 3, 4, 5 – CINQ ETAPES POUR UNE ENDODONTIE PARFAITE.

Le système de préparation endodontique Rotary System de Sendoline vous offre une solution simple et efficace.

### Caractéristiques :

- Seulement 5 limes, avec le design unique S-File
- Mandrin raccourci (13 mm) pour une accessibilité accrue
- Lames longues à pas progressif pour prévenir les vissages
- Élimination optimale des débris
- Conçues pour une utilisation avec le S5 Endo Motor

*"Le système de limes S5 n'est pas seulement simple d'emploi, il procure également des résultats prédictibles !"*  
Dr. Paul Godbold, *Omnipraticien, Angleterre*

*"Le S5 Rotary System permet de réaliser des préparations endodontiques de manière sûre et efficace pour le nettoyage, la désinfection et l'obturation optimum, et cela quel que soit le canal à traiter."*  
Dr. Claire Redley, *Omnipraticienne, Angleterre*

## S5 Apex Locator<sup>®</sup>

Un localisateur d'apex électronique ultraprécis qui permet de mesurer précisément la longueur de travail endodontique. Son design compact le rend portable et très facile d'emploi.

### Caractéristiques :

- Localisation de haute précision du foramen apical dans les canaux secs ou humides
- Mesures entièrement automatiques
- Design compact et convivial
- Fonction arrêt automatique
- Indicateur sonore avec contrôle du volume

# Préparation

## S5 Big Apical Files

Comment préparer les apex plus larges que la taille 30 ?  
Pour de meilleurs résultats au niveau des diamètres apicaux plus larges, les limes apicales S5 complètent avantageusement le S5 Rotary System. Après utilisation des limes de préparation S5, finir au niveau de la partie apicale avec les limes apicales S5.  
Tailles disponibles : Conicité/ISO 4/35 à 4/50.  
Longueurs : 23 et 28 mm.



# Obturation

## S5 GP Points

Comment obturer les canaux préparés avec le S5 Rotary System ?  
Les pointes de gutta percha S5 de Sendoline sont spécifiquement conçues pour s'adapter aux préparations endodontiques réalisées avec les limes S5 Rotary Files. Finir la préparation avec une lime n° 2 ou n° 3, puis sélectionner la pointe de gutta percha S5 correspondant à celle-ci. Tailles disponibles (Conicité/ISO) : n° 2 (6/30) ou n° 3 (4/30). Conditionnement : boîte de 60 pointes.



## S5 Paper Points

Les pointes de papier S5 de Sendoline, roulées aux dimensions exactes, simplifient les traitements endodontiques grâce à leur excellent pouvoir d'absorption et leur emploi conjugué aux pointes de gutta percha S5.  
Tailles disponibles (Conicité/ISO) : n° 2 (6/30) ou n° 3 (4/30).  
Conditionnement : boîte de 60 pointes.




# Retraitement

## S5 Retreatment Files

Les limes de retraitement S5 permettent d'éliminer rapidement et facilement les anciens matériaux d'obturation endodontique. Pour réaliser le retraitement endodontique, il suffit d'employer 4 limes seulement, selon la technique Crown-Down. Les marquages des limes de retraitement correspondent aux programmes du S5 Endo Motor. Tailles disponibles (Conicité/ISO) : Lime 1 (12/30) longueur 18 mm - Limes 2 à 4 (8/30, 6/30, 4/30) longueur 23 mm.



 Ces Dispositifs Médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE0413 Intertek Semko AB - Classe IIa. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne le Dispositif Médical ou sur l'étiquetage remis. Produits non-remboursés par les organismes d'assurance santé.

**Sendoline**  
PERFECT ENDO

Sendoline AB  
Box 7037, Tillverkarvägen 6,  
SE-187 11 Täby, Sweden  
Tél : +46 8 445 88 30  
Fax : +46 8 445 88 33  
info@sendoline.com

**bisico**  
AU SERVICE DE VOTRE EFFICACITÉ

Bisico France  
120, Allée de la Coudoulette  
13680 Lançon de Provence  
Tél : +33 (0)4 90 42 92 92  
Fax : +33 (0)4 90 42 92 61  
svce.commercial@bisico.fr / www.bisico.fr