


FLEXIPALETTE FORME A

Contrasteurs pour photographie intra-orale



Flexipalette A

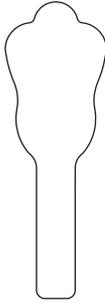

Flexipalette B



Flexipalette C



Flexipalette
Color Match



FLEXIPALETTE FORME B

Contrasteurs pour photographie intra-orale



FR

Le design novateur de Flexipalette permet d'obtenir un arrière plan totalement noir et sans reflets pour la prise de photographies.

Leur forme ergonomique est synonyme de manipulation aisée pour le photographe, de même que pour le patient qui pourra le positionner lui-même.

Flexipalettes peuvent être pliées et ont une surface tendre qui évite tout contact désagréable en bouche.

PlastiMed est un silicone de qualité médicale, sans latex, hypoallergénique, sans problème pour les allergies connues aux matières plastiques et adéquat pour usage intra-oral.

Le matériau noir est totalement opaque et sans reflets. Grâce à sa texture fine Flexipalette garantit des fonds d'images totalement noirs et propres.

Les Flexipalettes peuvent être pliées pour s'adapter de manière ergonomique en bouche.

Instructions:

Pour des résultats optimaux, il est recommandé d'incliner la Flexipalette à un angle de 45° face au flash afin de dévier la lumière hors du champ de l'image. Le fait de plier Flexipalette aide à atteindre cette angulation souhaitée.

Flexipalette Forme A

- 1.- Palette large à protuberance pour prises de vue larges
 - 2.- Manche pour positionnement
- Se référer au dessin sur l'emballage pour plier votre Flexipalette A.

Nettoyage et désinfection:

Laver délicatement la Flexipalette dans de l'eau tiède avec un peu de savon doux en utilisant une éponge (ne pas utiliser de fibres ou de brosses métalliques). La procédure de stérilisation sera faite après cette opération.

La stérilisation des Flexipalettes doit être faite en autoclave à 135°C (vapeur d'eau) durant 15 minutes. Ne pas stériliser au-dessus de 210°C. Ne PAS stériliser à sec.

Flexipalette est résistante aux alcools, phénols, glutaldéhydes, leurs dérivés et autres désinfectants sans mercure.

Précautions:

Ranger Flexipalette à l'abri de la lumière.

Ne pas exposer Flexipalette à la lumière du soleil pour une durée prolongée.

Ne pas stériliser à sec.

FR

Le design novateur de Flexipalette permet d'obtenir un arrière plan totalement noir et sans reflets pour la prise de photographies.

Leur forme ergonomique est synonyme de manipulation aisée pour le photographe, de même que pour le patient qui pourra le positionner lui-même.

Flexipalettes peuvent être pliées et ont une surface tendre qui évite tout contact désagréable en bouche.

PlastiMed est un silicone de qualité médicale, sans latex, hypoallergénique, sans problème pour les allergies connues aux matières plastiques et adéquat pour usage intra-oral.

Le matériau noir est totalement opaque et sans reflets. Grâce à sa texture fine Flexipalette garantit des fonds d'images totalement noirs et propres.

Les Flexipalettes peuvent être pliées pour s'adapter de manière ergonomique en bouche.

Instructions:

Pour des résultats optimaux, il est recommandé d'incliner la Flexipalette à un angle de 45° face au flash afin de dévier la lumière hors du champ de l'image. Le fait de plier Flexipalette aide à atteindre cette angulation souhaitée.

Flexipalette Forme B

- 1.- Une extrémité de forme arrondie pour arcades grandes et moyennes.
- 2.- Une extrémité de forme arrondie pour arcades moyennes et petites, usage pédiatrique, images latérales de la zone antéro-postérieure.

Le design unique à deux extrémités de la palette permet un maximum de prises de vue avec le même instrument.

Se référer au dessin sur l'emballage pour plier votre Flexipalette B.

Nettoyage et désinfection:

Laver délicatement la Flexipalette dans de l'eau tiède avec un peu de savon doux en utilisant une éponge (ne pas utiliser de fibres ou de brosses métalliques). La procédure de stérilisation sera faite après cette opération.

La stérilisation des Flexipalettes doit être faite en autoclave à 135°C (vapeur d'eau) durant 15 minutes. Ne pas stériliser au-dessus de 210°C. Ne PAS stériliser à sec.

Flexipalette est résistante aux alcools, phénols, glutaldéhydes, leurs dérivés et autres désinfectants sans mercure.


Précautions:

Ranger Flexipalette à l'abri de la lumière.

Ne pas exposer Flexipalette à la lumière du soleil pour une durée prolongée. Ne pas stériliser à sec.

FLEXIPALETTE FORME C


Contrasteurs pour photographie intra-orale

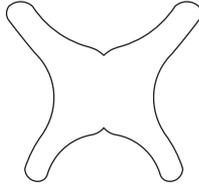

	Item no.
Flexipalette A	#FP-3001
Flexipalette B	#FP-3002
Flexipalette C	#FP-3003
Flexipalette Color Match	#FP-3004
Flexipalette Set 4 pcs	#FP-3100

FLEXIPALETTE Color Match

Contrasteurs pour photographie intra-orale

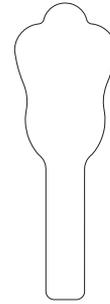

FR

Le design novateur de Flexipalette permet d'obtenir un arrière plan totalement noir et sans reflets pour la prise de photographies.

Leur forme ergonomique est synonyme de manipulation aisée pour le photographe, de même que pour le patient qui pourra le positionner lui-même.

Flexipalettes peuvent être pliées et ont une surface tendre qui évite tout contact désagréable en bouche.

PlastiMed est un silicone de qualité médicale, sans latex, hypoallergénique, sans problème pour les allergies connues aux matières plastiques et adéquat pour usage intra-oral.

Le matériau noir est totalement opaque et sans reflets. Grâce à sa texture fine Flexipalette garantit des fonds d'images totalement noirs et propres.

Les Flexipalettes peuvent être pliées pour s'adapter de manière ergonomique en bouche.

Instructions:

Pour des résultats optimaux, il est recommandé d'incliner la Flexipalette à un angle de 45° face au flash afin de dévier la lumière hors du champ de l'image. Le fait de plier Flexipalette aide à atteindre cette angulation souhaitée.

Flexipalette Forme C

1.- Contour en forme de «H» pour rétraction de la lèvre supérieure, utile pour obtenir un fond noir lors de prises de vue occlusales.

2.- Contour en forme de «H» pour rétraction de la lèvre inférieure, usage pédiatrique, utile pour obtenir un fond noir lors de prises de vue occlusales.

Se référer au dessin sur l'emballage pour plier votre Flexipalette C.

Nettoyage et désinfection:

Laver délicatement la Flexipalette dans de l'eau tiède avec un peu de savon doux en utilisant une éponge (ne pas utiliser de fibres ou de brosses métalliques). La procédure de stérilisation sera faite après cette opération.

La stérilisation des Flexipalettes doit être faite en autoclave à 135°C (vapeur d'eau) durant 15 minutes. Ne pas stériliser au-dessus de 210°C. Ne PAS stériliser à sec.

Flexipalette est résistante aux alcools, phénols, glutaldéhydes, leurs dérivés et autres désinfectants sans mercure.

Précautions:

Ranger Flexipalette à l'abri de la lumière.

Ne pas exposer Flexipalette à la lumière du soleil pour une durée prolongée.

Ne pas stériliser à sec.

FR

Flexipalette Color Match offre un gris totalement neutre à 18%, le standard en matière de photographie. Sa forme ergonomique permet une manipulation facile pour le dentiste ou le prothésiste, de même que pour le patient qui pourra positionner la Flexipalette Color Match lui-même.

Les Flexipalettes peuvent être pliées et ont une surface tendre qui évite tout contact désagréable en bouche.

PlastiMed est un silicone de qualité médicale, sans latex, hypoallergénique, sans problème pour les allergies connues aux matières plastiques et adéquat pour usage intra-oral.

Le matériau est totalement opaque et sans reflets.

Flexipalette Color Match peut être pliée pour s'adapter de manière ergonomique en bouche, mais il n'est pas indiqué de plier Flexipalette Color Match lors d'usage en photographie professionnelle.

Instructions:

1.- Permet d'obtenir un arrière plan absolument neutre lors de la prise de teinte, essentiellement dans la zone antérieure (PAS pour photographe).

2.- Outil pour le réglage de la balance des blancs sur les appareils photo numériques.

3.- Fond neutre pour photos créatives.

Nettoyage et désinfection:

Laver délicatement la Flexipalette dans de l'eau tiède avec un peu de savon doux en utilisant une éponge (ne pas utiliser de fibres ou de brosses métalliques). La procédure de stérilisation sera faite après cette opération.

La stérilisation des Flexipalettes doit être faite en autoclave à 135°C (vapeur d'eau) durant 15 minutes. Ne pas stériliser au-dessus de 210°C. Ne PAS stériliser à sec.

Flexipalette est résistante aux alcools, phénols, glutaldéhydes, leurs dérivés et autres désinfectants sans mercure.

Précautions:

Il n'est pas indiqué de plier Flexipalette Color Match lors d'usage en photographie professionnelle.

Ranger Flexipalette à l'abri de la lumière.

Ne pas exposer Flexipalette à la lumière du soleil pour une durée prolongée.

Ne pas stériliser à sec.